




ПРОВОЛОКА И ПРОВОЛОЧНЫЕ ФОРМЫ

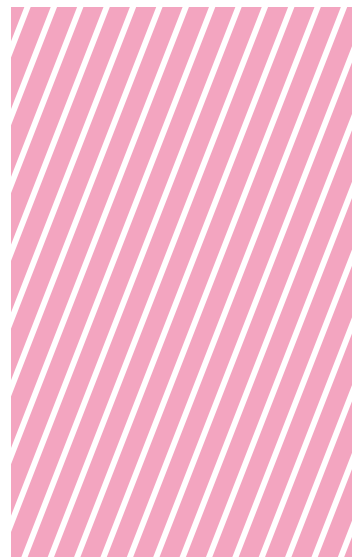

C

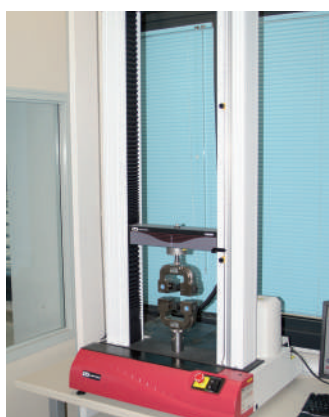

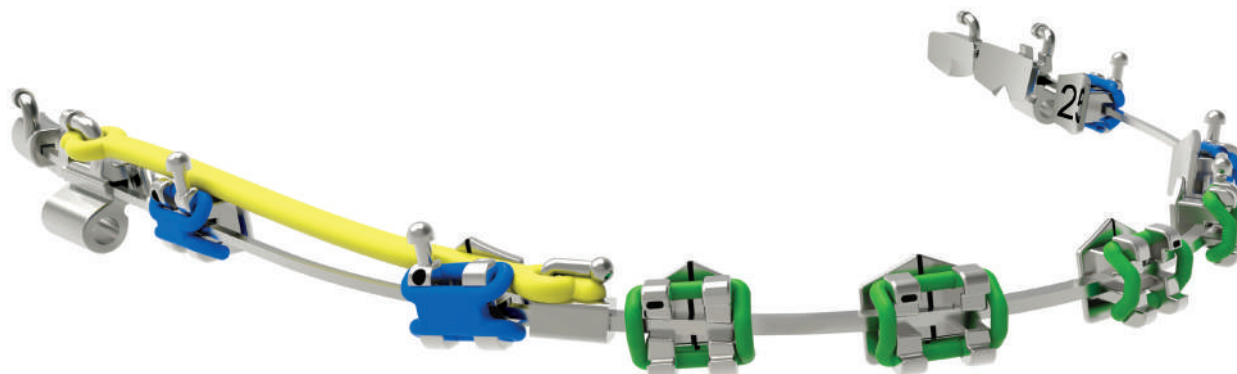

В нашем Центре биотехнологических исследований «Marco Pozzi» для проверки механических свойств проволоки используются микротвердомер Shimadzu и испытательная машина Instron

Ортодонтические дуги Leone доступны в различных сплавах и различных классах эластичности и твердости для удовлетворения любых терапевтических потребностей. Механические свойства проволоки постоянно проверяются для обеспечения стабильного качества. Все проволоки Leone поставляются в практической упаковке в виде мотков или прямых отрезков проволоки. Ассортимент включает лабораторную проволоку из нержавеющей стали, хромокобальтового сплава, который можно подвергать термообработке, и проволоку BIOSTEEL®, не содержащая никеля.

Разнообразные формы дуг изготавливаются из различных сплавов:

- нержавеющая сталь с различными механическими свойствами для удовлетворения любых ортодонтических потребностей;
- никель-титановый сплав, доступный как **MEMORIA®**, **THERMOMEMORIA®** и **MEMORIA® NATURA®**, высвобождающий плавные, но постоянные усилия, ему можно придать большое разнообразие форм;
- Титан-молибденовый сплав без содержания никеля, доступный как Beta **MEMORIA®**, отличающийся исключительной гибкостью и эластичностью, а также низким коэффициентом трения.

Упаковки для дуг Leone отличаются особой аккуратной конструкцией. Стальная и крзат проволока упаковывается в скрученные катушки, препятствующие скручиванию, а прямая проволока упаковывается в трубки треугольной формы, чтобы предотвратить скатывание со стола. Все дуги Leone упакованы в небольшие конверты, на которых четко указан артикул, размеры, характеристики продукта и номер партии.

LEOWIRE® СТАЛЬНАЯ ПРОВОЛОКА ПРУЖИННО-ЖЕСТКАЯ.

Хромированная нержавеющая сталь.
Алмазная обработка для получения высокостойких и нержавеющей выровненных поверхностей. Подходит для изготовления всех ортодонтических конструкций.



BIOSTEEL® СТАЛЬНАЯ ПРОВОЛОКА *НЕ СОДЕРЖИТ НИКЕЛЯ*

Сплав из нержавеющей стали, специально изготовленный для предотвращения любых аллергических реакций на никель (Cr 16,5%, Mn 11%, Mo 2,7%, N 0,5%, остаток Fe). Подходит для всех ортодонтических применений.

*Содержание микроэлементов никеля $\leq 0,05\%$ обусловлено процессом производства



СТАНДАРТНАЯ КАТУШКА

$\varnothing$		LEOWIRE® пружинно-жесткая	BIOSTEEL® пружинно-жесткая	
мм	дюйм	1800/2000 Н/мм ²	1800/2000 Н/мм ²	м
0,5	.020	C0400-05		50
0,6	.024	C0400-06	C0401-06	40
0,7	.028	C0400-07	C0401-07	25
0,8	.032	C0400-08	C0401-08	20
0,9	.036	C0400-09	C0401-09	10
1,0	.040	C0400-10	C0401-10	10
1,1	.044	C0400-11		10
1,2	.048	C0400-12		10
1,3	.052	C0400-13		10
1,4	.055	C0400-14		8

ЛАБОРАТОРНАЯ КАТУШКА



		LEOWIRE® пружинно-жесткая	BIOSTEEL® пружинно-жесткая		
		1800/2000 Н/мм ²	1800/2000 Н/мм ²	м	гр
		C0450-05		306	
		C0450-06	C0451-06	225	
		C0450-07	C0451-07	165	
		C0450-08	C0451-08	125	
		C0450-09	C0451-09	100	
		C0450-10	C0451-10	80	
		C0450-11		70	
		C0450-12		53	
		C0450-13		45	
		C0450-14		39	


500





ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ ПРОВОЛОКА ИЗ ХРОМ-КОБАЛЬТОВОГО СПЛАВА

Термообрабатываемый хром-кобальтовый сплав, нержавеющей и прочный. Его прочность на растяжение позволяет легко и без поломок придавать форму даже сложным конструкциям. Самоотвердевает при пайке или нагреве до 450° С. Используется для любой проволочной Крозат-техники.

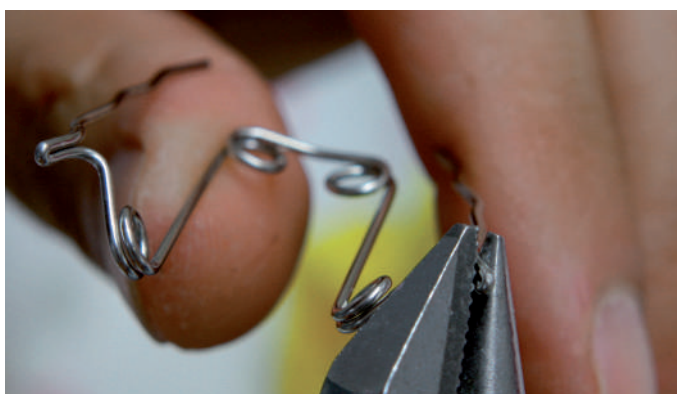

Ø		твердая термообрабатываемая		упак.
мм	дюйм	1350/1500 Н/мм ²	м	гр.
0,6	.024	C0410-06	30	70
0,7	.028	C0410-07	22	
0,8	.032	C0410-08	17	
0,9	.036	C0410-09	13	
1,0	.040	C0410-10	11	
1,1	.044	C0410-11	9	
1,2	.048	C0410-12	8	
1,3	.052	C0410-13	6	



ПРЯМАЯ КРУГЛАЯ ПРОВОЛОКА

Сплав специально разработан для формирования дуг и пружин в несъемных ортодонтических аппаратах. Алмазная обработка для получения устойчивой поверхности. Доступна в трех степенях упругости: жесткая, пружинно-жесткая и сверхпружинно-жесткая, что позволяет адаптировать ее к любому терапевтическому применению

Ø	жесткая	пружинно-жесткая	сверхпружинно-жесткая	упак.
дюйм	1400/1600 Н/мм ²	1800/2000 Н/мм ²	2200/2400 Н/мм ²	
.014	C8080-14	C8180-14	C8380-14	20 штук
.016	C8080-16	C8180-16	C8380-16	
.018	C8080-18	C8180-18	C8380-18	
.020	C8080-20	C8180-20	C8380-20	
.032	C8080-32			
.036	C8080-36			
.040	C8080-40			
.045	C8080-45			
.051	C8080-51			



ПРЯМАЯ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ПРОВОЛОКА

Сплав, специально разработанный для ортодонтического применения. Алмазная обработка для получения идеально прямых углов и ровной поверхности. Доступна в двух степенях упругости: пружинно-жесткая и сверхпружинно-жесткая, протестирована и контролируется в лаборатории.

▧	пружинно-жесткая	сверхпружинно-жесткая	упак.
дюйм	1800/2000 Н/мм ²	2200/2400 Н/мм ²	
.016x.016	C8016-16	C8116-16	10 штук
.016x.022	C8022-16	C8122-16	
.017x.017	C8017-17	C8117-17	
.017x.022	C8022-17	C8122-17	
.017x.025	C8025-17	C8125-17	
.018x.022	C8022-18		
.018x.025	C8025-18	C8125-18	
.019x.025	C8025-19	C8125-19	
.020x.025	C8025-20		
.021x.025	C8025-21	C8125-21	
.0215x.028	C8028-21	C8128-21	





LEOLOU® КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ТЕРМООБРАБОТАННЫЕ ДУГИ

Сплав на основе хрома и кобальта, термообработанный. Высокая устойчивость к коррозии и поломке. Выпускается в двух вариантах твердости.

В упаковке 10 шт

мягкая термообработанная		пружинная термообработанная
1400/1600 Н/мм ²	дюйм	1700/1900 Н/мм ²
C8216-16	.016x.016	C8416-16
C8222-16	.016x.022	C8422-16
C8225-17	.017x.025	C8425-17

ГОЛУБАЯ LEOLOU® ДУГА МЯГКАЯ ТЕРМООБРАБОТАННАЯ.

Изначально менее твердая из двух видов. Она предназначена для конструирования дуг, где требуются значительные изгибы. После термообработки (480°C) она становится такой же твердой, как проволока из нержавеющей стали. Рекомендуются для техники Ricketts.

ЖЕЛТАЯ LEOLOU® ДУГА ПРУЖИННАЯ ТЕРМООБРАБОТАННАЯ

Обладает более пружинящими качествами, чем голубая. Она предназначена для конструирования дуг, где требуются значительные изгибы. Ее можно использовать в готовом виде или подвергнуть термообработке (480°C), если требуется большая пружинистость.



“АВСТАЛИЙСКАЯ” ПРОВОЛОКА В КАТУШКЕ

Алмазная обработка для идеального исправления прикуса. Оба вида проволоки проходят лабораторные испытания и контролируются на качество.

Катушка 8 м


Ø	сверхпружинно- жесткая	сверхтвердая термообработанная
дюйм	2200/2400 Н/мм ²	2500/2700 Н/мм ²
.012	C0420-12	
.014	C0420-14	C0430-14
.016	C0420-16	C0430-16
.018	C0420-18	C0430-18
.020	C0420-20	C0430-20



“АВСТАЛИЙСКАЯ” ПРОВОЛОКА В ФОРМЕ ДУГИ


В упаковке 10 шт

medium верх	Ø	medium низ
	дюйм	
C2010-16	.016	C2050-16
C2010-20	.020	C2050-20

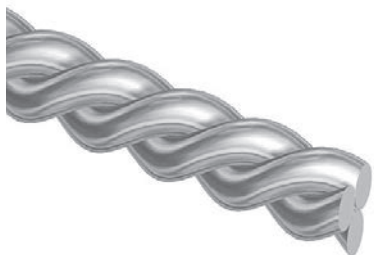



ПРЯМАЯ TWIST ПРОВОЛОКА

Ø		
дюйм		упак.
.015	C8580-15	10 штук
.0175	C8580-17	
.0195	C8580-19	
.0215	C8580-21	

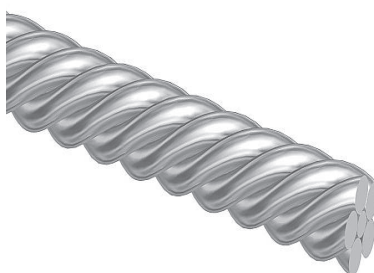

ПРЯМАЯ FLEX ПРОВОЛОКА


Ø		
дюйм		упак.
.015	C8880-15	10 штук
.0175	C8880-17	
.0195	C8880-19	

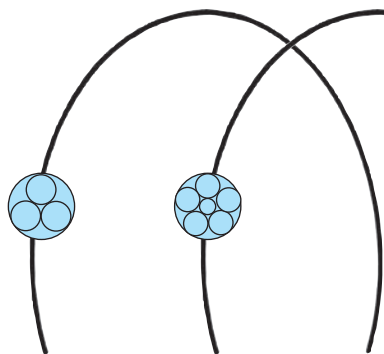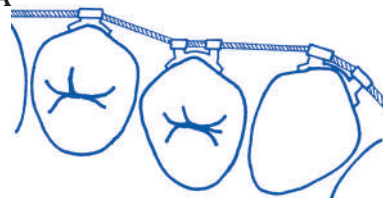

КРУГЛЫЕ СФОРМИРОВАННЫЕ TWIST И FLEX ДУГИ

twist		
Ø		
дюйм		упак.
.0155	C5540-15	10
.0175	C5540-17	

flex		
Ø		
дюйм		упак.
.0155	C5440-15	10
.0175	C5440-17	

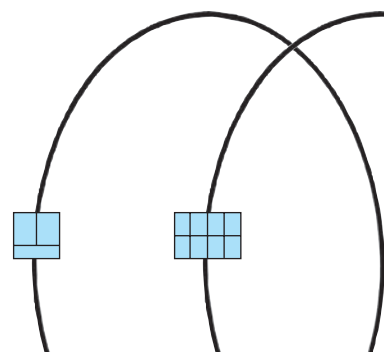

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СФОРМИРОВАННЫЕ TWIST ДУГИ

twist 3 проволоки		
Ø		
дюйм		упак.
.016x.016	C5541-16	10
.016x.022	C5542-16	

twist 8 проволок		
Ø		
дюйм		упак.
.017x.025	C5745-17	10
.018x.025	C5745-18	

КРУГЛЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ДУГИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



КРУГЛЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ДУГИ

Стандартные сформированные. Изготовлены из сверхпружинно-жесткой проволоки для лучшей эластичности. Маркировка на дуге- черный цвет для верхней челюсти и красный цвет для нижней челюсти.

В упаковке 10 шт



верх	Ø	низ
	дюйм	
C5110-12	.012	C5150-12
C5110-14	.014	C5150-14
C5110-16	.016	C5150-16
C5110-18	.018	C5150-18
C5110-20	.020	C5150-20




верх	∕	низ
	дюйм	
C5111-16	.016x.016	C5151-16
C5112-16	.016x.022	C5152-16
C5115-17	.017x.025	C5155-17
C5115-18	.018x.025	C5155-18
C5115-19	.019x.025	C5155-19
C5115-21	.021x.025	C5155-21

КРУГЛЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СФОРМИРОВАННЫЕ ДУГИ

Сверхпружинная жесткая проволока, круглая или прямоугольная, с алмазным напылением для исправления прикуса. Доступные в малой, средней и большой форме, как верхние, так и нижние, они представляют собой идеальное решение для достижения целей лечения. Селектор дуги C5950-00 позволяет выбрать правильную форму для лечения.



Ø	small		medium		large		упак.
дюйм	верх	низ	верх	низ	верх	низ	
.014			C3110-14	C3150-14			10
.016	C3010-16	C3050-16	C3110-16	C3150-16	C3210-16	C3250-16	
.018	C3010-18	C3050-18	C3110-18	C3150-18	C3210-18	C3250-18	
.020			C3110-20	C3150-20			
∕							10
.016x.016			C3111-16	C3151-16			
.016x.022	C3012-16	C3052-16	C3112-16	C3152-16	C3212-16	C3252-16	
.017x.025			C3112-17	C3152-17			
.018x.025	C3012-18	C3052-18	C3112-18	C3152-18	C3212-18	C3252-18	
.019x.025	C3012-19	C3052-19	C3112-19	C3152-19	C3212-19	C3252-19	
.021x.025			C3112-21	C3152-21			

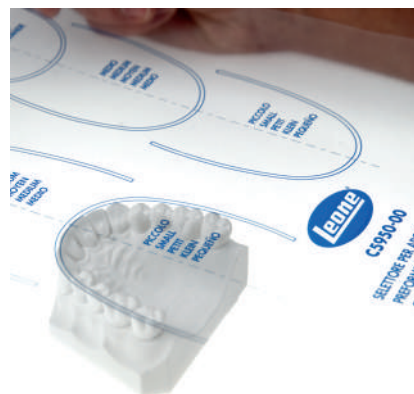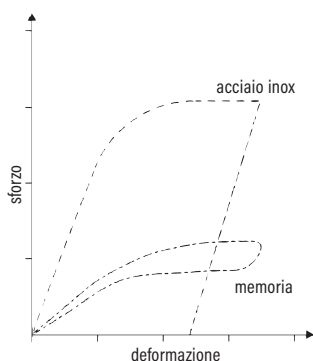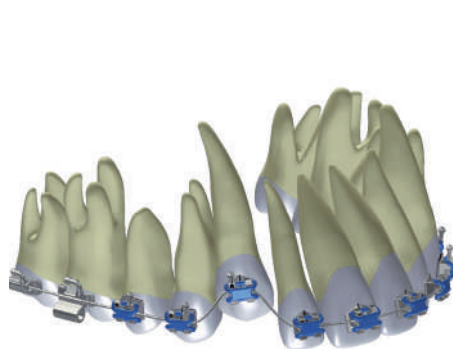

MEMORIA® СФОРМИРОВАННЫЕ ДУГИ

Изготовленные из сверхэластичного сплава на основе никеля и титана, эти дуги обеспечивают мягкое и непрерывное воздействие, сокращают время лечения и повышают комфорт пациента. Тщательно отполированная поверхность устраняет любое трение в пазу брекета. Их недеформируемость и сверхэластичность, выражающиеся в непрерывной передаче усилия в широком диапазоне отклонений, были проверены на тысячах процедур. Доступные в малой, средней и большой форме, как верхние, так и нижние, они представляют собой идеальное решение для достижения целей лечения.

C5950-00

СЕЛЕКТОР ДЛЯ ВЫБОРА ДУГИ

Наведите селектор на модель и выберите правильную форму дуги.



Ø	small		medium		large		
дюйм	верх	низ	верх	низ	верх	низ	упак.
.012			C5910-12	C5950-12			10
.014	C5913-14	C5953-14	C5910-14	C5950-14	C5916-14	C5956-14	
.016	C5913-16	C5953-16	C5910-16	C5950-16	C5916-16	C5956-16	
.018	C5913-18	C5953-18	C5910-18	C5950-18	C5916-18	C5956-18	
.020			C5910-20	C5950-20			
							
.016x.016			C5911-16	C5951-16			10
.016x.022	C5914-16	C5954-16	C5912-16	C5952-16	C5917-16	C5957-16	
.017x.025	C5914-17	C5954-17	C5912-17	C5955-17	C5917-17	C5957-17	
.018x.018			C5911-18	C5951-18			
.018x.025	C5914-18	C5954-18	C5915-18	C5955-18	C5917-18	C5957-18	
.019x.025	C5914-19	C5954-19	C5915-19	C5955-19	C5917-19	C5957-19	
.021x.025			C5915-21	C5955-21			



	medium		
дюйм	верх	низ	упак.
.012	C5910-012	C5950-012	25
.014	C5910-014	C5950-014	
.016	C5910-016	C5950-016	
.018	C5910-018	C5950-018	
.020	C5910-020	C5950-020	
			
.016x.016	C5911-016	C5951-016	25
.016x.022	C5912-016	C5952-016	
.017x.025	C5912-017	C5955-017	
.018x.018	C5911-018	C5951-018	
.018x.025	C5915-018	C5955-018	
.019x.025	C5915-019	C5955-019	
.021x.025	C5915-021	C5955-021	



MEMORIA® СФОРМИРОВАННЫЕ ДУГИ «V» ИЗГИБ


V-образный изгиб посередине дуги позволяет избежать любое нежелательное смещение дуги, обеспечивая терапевтическое лечение, ранее предусмотренное для выбранной формы дуги.



medium верх	Ø	medium низ	упак.
	дюйм		
C5910V12	.012	C5950V12	10
C5910V14	.014	C5950V14	
C5910V16	.016	C5950V16	
C5910V18	.018	C5950V18	

medium верх	Ø	medium низ	упак.
	дюйм		
C5911V16	.016x.016	C5951V16	10
C5912V16	.016x.022	C5952V16	
C5912V17	.017x.025	C5955V17	
C5915V18	.018x.025	C5955V18	

ДУГА РЕВЕРСИОННАЯ MEMORIA®

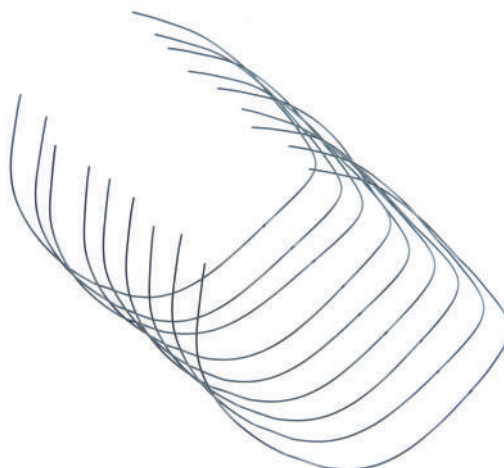

Суперэластичные никель-титановые дуги для выравнивания движений и закрытия промежутков. Они также показаны для исправления изменений прикуса.

В упаковке 10 шт

верх	Ø	низ
	дюйм	
C6910-16	.016	C6950-16
C6910-18	.018	C6950-18

верх	Ø	низ
	дюйм	
C6912-16	.016x.022	C6952-16
C6912-17	.017x.025	C6952-17
C6912-19	.019x.025	C6952-19



АНАТОМИЧЕСКИЕ ДУГИ MEMORIA®

Сверхэластичные дуги из сплава на основе никеля и титана, передающие биологические усилия в широком диапазоне отклонений. Дуги MEMORIA® доступны в пяти формах, разработанных после обширных исследований, и представляют собой идеальное решение для индивидуальных проблем лечения.

Используя специальный селектор дуг, можно легко найти наиболее подходящую форму дуги.



∅	A	B	C	D	E	упак.
дюйм						
.014	C6040-14	C6140-14	C6240-14	C6340-14	C6440-14	10
.016	C6040-16	C6140-16	C6240-16	C6340-16	C6440-16	
.018	C6040-18	C6140-18	C6240-18	C6340-18	C6440-18	
mm						
.016x.016	C6041-16	C6141-16	C6241-16	C6341-16	C6441-16	10
.016x.022	C6042-16	C6142-16	C6242-16	C6342-16	C6442-16	
.017x.025	C6042-17	C6142-17	C6242-17	C6342-17	C6442-17	
.019x.025	C6045-19	C6145-19	C6245-19	C6345-19	C6445-19	



C6250-00

СЕЛЕКТОР ДЛЯ АНАТОМИЧЕСКИХ ДУГ MEMORIA®

Наведите селектор на модель и выберите правильную форму дуги.



ДУГИ THERMOMEMORIA®

Инновация в дугах из никель-титанового сплава. В зависимости от комнатной температуры или температуры тела эти дуги ведут себя по-разному. Эти дуги можно постоянно сгибать плоскогубцами при комнатной температуре, но после установки при температуре во рту около 37°C они возвращаются к своей первоначальной запрограммированной форме, оказывая мягкое и непрерывное воздействие на зубы. Эта особенность облегчает их введение в смещенные пазы брекетов и снижает травмирование пациента, позволяя использовать прямоугольные дуги на ранних стадиях лечения и обеспечивая хороший контроль торка во время перемещения зубов. В упаковке 10 шт

верх	Ø	низ	верх	Ø	низ
	дюйм			дюйм	
C5930-16	.016	C5970-16	C5931-16	.016x.016	C5971-16
C5930-18	.018	C5970-18	C5932-16	.016x.022	C5972-16
			C5935-18	.018x.025	C5975-18
			C5935-19	.019x.025	C5975-19
			C5935-21	.021x.025	C5975-21



верх


низ

C6100-13

КОМПЛЕКТ ДУГ К ТЕХНИКЕ STEP SYSTEM 2.0



Комплект поставки: 13 дуг, 7 верхних и 6 нижних, необходимых для выполнения однократного лечения по методике **STEP 2.0**. Каждая дуга находится в индивидуальной упаковке. Упаковки обозначены идентификационным номером и эскизом зуба, которые указывают на последовательность применения и функцию дуги.

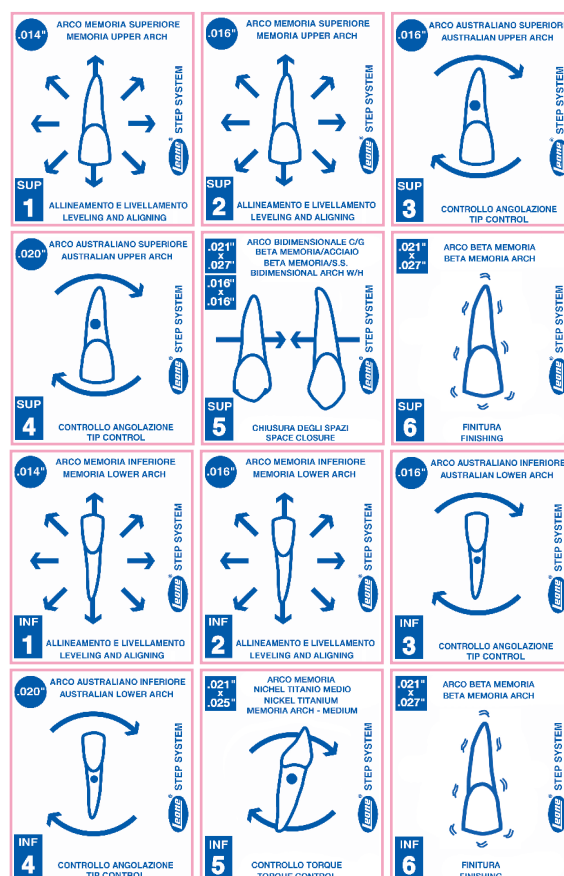



БЕТА MEMORIA® ТМА ПРОВОЛОКА И ДУГИ

Изготовлены из титан-молибденового сплава, обладают высокой эластичностью и хорошей изгибаемостью плоскогубцами. Высококачественная обработка для минимизации трения между дугой и пазом. Не содержат никеля. Они подходят для пациентов с аллергическими реакциями.

ДУГИ БЕТА MEMORIA®

	верх	Ø	низ	
		дюйм		упак.
medium	C7110-16	.016	C7150-16	10
	C7110-18	.018	C7150-18	

	upper	inch	lower	
		inch		pkg.
small	C7012-21	.021x.027	C7015-21	10
	C7112-16	.016x.022	C7115-16	
medium	C7112-17	.017x.025	C7115-17	
	C7112-19	.019x.025	C7115-19	
	C7112-21	.021x.027	C7115-21	

ПРЯМАЯ КРУГЛАЯ ПРОВОЛОКА БЕТА MEMORIA®

Ø		
дюйм		упак.
.016	C7900-16	10 штук длиной по 35 см
.032	C7900-32	
.036	C7900-36	
Ø		
.016x.022	C7922-16	
.017x.025	C7925-17	



ЛИНГВАЛЬНЫЕ ДУГИ ДЛЯ БРЕКЕТОВ IDEA-L

Дуги .012" и .014" изготовлены из специального никель-титанового сплава, позволяющего легко адаптироваться в случае расширенного лечения на первые премоляры, сохраняя при этом высокую эластичность. Дуги .016" Beta MEMORIA® идеально подходят для оптимизации заданных значений выравнивания и нивелирования.


В упаковке 2 шт

ЛИНГВАЛЬНЫЕ ДУГИ MEMORIA®

Ø	small	medium	large
дюйм			
.012	C4950-12	C4951-12	C4952-12
.014	C4950-14	C4951-14	C4952-14

ЛИНГВАЛЬНЫЕ ДУГИ БЕТА MEMORIA®

.016	C4970-16	C4971-16	C4972-16
------	-----------------	-----------------	-----------------

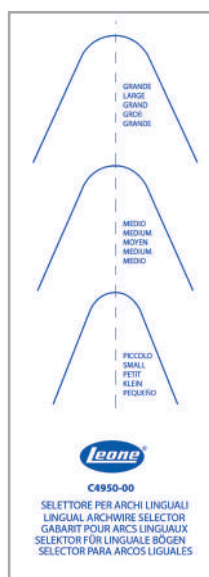

C4950-00 СЕЛЕКТОР ДЛЯ ЛИНГВАЛЬНЫХ ДУГ

Наложите селектор на модель и выберите правильную форму дуги.

ОБЛИЦОВАННЫЕ ПРЕФОРМИРОВАННЫЕ ДУГИ MEMORIA® NATURA®

Они сочетают в себе высокую эластичность и устойчивость к деформации сверхэластичных никель-титановых дуг с лучшей эстетикой. Покрытие под цвет зуба очень жесткое и устойчиво к абсорбции жидкостей полости рта, поэтому при использовании с металлическими и эстетическими брекетами достигается меньшее трение. Доступны круглые или прямоугольные.

В упаковке 10 шт



верх	Ø дюйм	низ
C5918-14	.014	C5958-14
C5918-16	.016	C5958-16
C5918-18	.018	C5958-18
C5918-20	.020	C5958-20


верх	∕ дюйм	низ
C5982-16	.016x.022	C5992-16
C5985-18	.018x.025	C5995-18
C5985-19	.019x.025	C5995-19
C5985-21	.021x.025	C5995-21



C8922-16 ПРЯМАЯ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ПРОВОЛОКА MEMORIA®

Проволока из сплава на основе никеля и титана, которая сохраняет высокую эластичность и позволяет легко формировать профили и пружины. Доступна в размерах 0,016 x 0,022 дюйма.

В упаковке 10 проволок по 18см

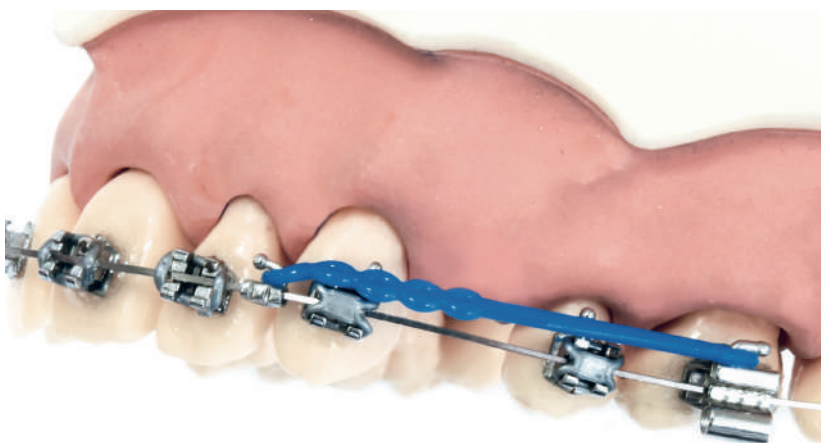


BI-DIMENSIONAL ДУГИ BETA MEMORIA®/СТАЛЬНЫЕ С КРЮЧКАМИ

Специальные дуги, которые сочетают в себе различные материалы и геометрию с целью контроля торга в передней части во время закрытия промежутка. Дуги имеют крючки, которые располагаются между латеральной частью и клыком, предназначены для натяжения и используются в качестве соединителя между частями дуги. Передняя часть изготовлена из сплава Beta MEMORIA® и доступна в размерах 0,019 x 0,025 дюйма или 0,021 x 0,027 дюйма для управления торком. Задняя часть изготовлена из нержавеющей стали размером 0,016 x 0,016 дюйма, что способствует скольжению дуги в пазу брекета.

В упаковке 2 шт

верх	расстояние между крючками		низ	расстояние между крючками
	мм			мм
C7110-34	34	.019x.025 / .016x.016	C7150-24	24
C7110-36	36		C7150-26	26
C7111-34	34	.021x.027 / .016x.016	C7151-24	24
C7111-36	36		C7151-26	26

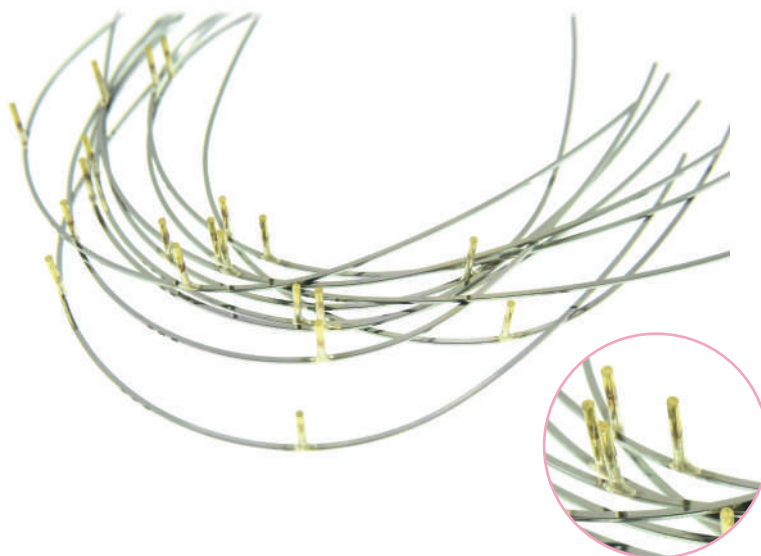

СТАЛЬНЫЕ ДУГИ С КРЮЧКАМИ

Средняя форма дуги. Изготовлены из жесткой пружинной проволоки .019"х.025".

В упаковке 10 шт

верх		низ	
мм		мм	
34	C3112-34	24	C3152-24
36	C3112-36	26	C3152-26
38	C3112-38	28	C3152-28
40	C3112-40	30	C3152-30
42	C3112-42		

Размер, выраженный в мм, указывает на расстояние между крючками.

СПИРАЛЬНЫЕ ПРУЖИНЫ MEMORIA®

Пружины из сверхэластичного никель-титанового сплава всегда использовались при ортодонтическом лечении. Эти пружины сочетают в себе характеристики спиральной пружины с недеформируемыми свойствами сверхэластичного сплава **MEMORIA®**. Доступны раскрывающие для компрессии и расширения пространства, закрывающие с закрученными концами для использования с крючками трубок и брекетов. Вместе с лигатурной проволокой позволяет соединять промежутки шириной более 15 мм.



ЗАКРЫВАЮЩИЕ ПРУЖИНЫ MEMORIA®


	гр.	упак.
light	150	C1230-00
medium	200	C1230-01
heavy	250	C1230-02



ОТКРЫВАЮЩИЕ ПРУЖИНЫ MEMORIA®

В упаковке 2 пружины по 18см.

	пружина	проволока	
super	.030	.009	C1009-30
light	.036	.009	C1009-36
light	.030	.010	C1211-30
medium	.030	.012	C1212-30
heavy	.036	.014	C1214-36
для внеротового губного бампера	.045	.010	C1210-45
	.055	.014	C1214-55

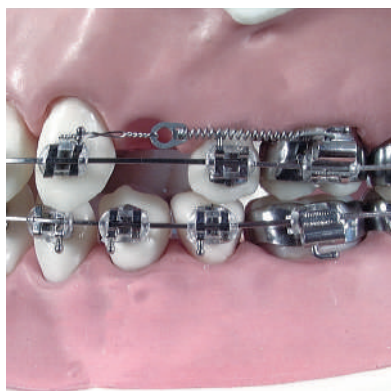

ЗАКРЫВАЮЩИЕ ПРУЖИНЫ MEMORIA® ЛИГАТУРОЙ

	гр.	упак.
light	150	C1231-00
medium	200	C1231-01
heavy	250	C1231-02



C1230-95 КОМПЛЕКТ ПРУЖИН MEMORIA®

Для хирургических крючков и стопоров имеются крампонные щипцы P1911-00.

Содержимое пакета:

3 открывающих пружины, 15 закрывающих пружин, 15 закрывающих пружин с лигатурой, 10 стопоров, 10 хирургических крючков **MIM®**




НЕБНЫЕ БЮГЕЛИ

Небные бюгели позволяют контролировать ротацию, расширение и сжатие верхних первых моляров. Изготовлены из термообработанной проволоки диаметром 0,9 мм, для повышения прочности на растяжение легко снимаются с трубок для активации.



РОТАЦИЯ

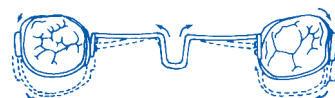

РАСШИРЕНИЕ



НЕБНЫЕ БЮГЕЛИ

мм	упак.
34	C0570-34
36	C0570-36
38	C0570-38
40	C0570-40
42	C0570-42
44	C0570-44
46	C0570-46
48	C0570-48
50	C0570-50
52	C0570-52

5

C0570-96 КОМПЛЕКТ НЕБНЫХ БЮГЕЛЕЙ

Набор 50 шт

РЕВЕРСИОННЫЕ НЕБНЫЕ БЮГЕЛИ

мм	упак.
34	C0576-34
36	C0576-36
38	C0576-38
40	C0576-40
42	C0576-42
44	C0576-44
46	C0576-46
48	C0576-48
50	C0576-50
52	C0576-52

5

C0576-96 КОМПЛЕКТ РЕВЕРСИОННЫХ НЕБНЫХ БЮГЕЛЕЙ

Набор 50 шт

ВНИМАНИЕ:

небный бюгель следует надежно фиксировать в лингвальные трубки стальными или эластичными лигатурами. Неправильное использование может привести к травмам, аспирации или проглатыванию. Рекомендуется для использования с лингвальными трубками МІМ®:



С ШАРОВИДНЫМ КРЮКОМ

G2846-02
G2846-03

правая
левая



С ШАРОВИДНЫМ КРЮКОМ РОТАЦИЯ -8°

G2847-02
G2847-03

правая
левая

ШАРОВИДНЫЙ КЛАММЕР

Изготовлен из биомедицинской нержавеющей стали. Благодаря инновационной плазменной технологии головка кламмера имеет идеальную сферическую форму.

Ø		упак.
мм	дюйм	
0,7	.028	C1610-17
0,8	.032	C1610-18
0,9	.036	C1610-19

100

СТАНДАРТНЫЕ КЛАММЕРЫ ADAMS

Изготовлены из пружинно-твердой нержавеющей стали.

C0580-95 КОМПЛЕКТ СТАНДАРТНЫХ КЛАММЕРОВ ADAMS

Набор 100 шт

Ø		упак.
мм		
5,0		C0580-05
5,5		C0580-055
6,0		C0580-06
6,5		C0580-065
7,0	0,7 мм	C0580-07
8,0		C0580-08
9,0		C0580-09
10,0		C0580-10
11,0		C0580-11
12,0		C0580-12

10

СТАНДАРТНЫЕ ВЕСТИБУЛЯРНЫЕ ДУГИ

Изготовлены из пружинно-твердой нержавеющей стали.

C0585-95 КОМПЛЕКТ СТАНДАРТНЫХ ВЕСТИБУЛЯРНЫХ ДУГ

Набор 100 шт

Ø		упак.
мм		
25		C0585-25
28		C0585-28
31		C0585-31
34		C0585-34
37	0,8 мм	C0585-37
40		C0585-40
43		C0585-43
46		C0585-46
48		C0585-48
50		C0585-50

10