



ВНУТРИ-ВНЕРОТОВЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ



М

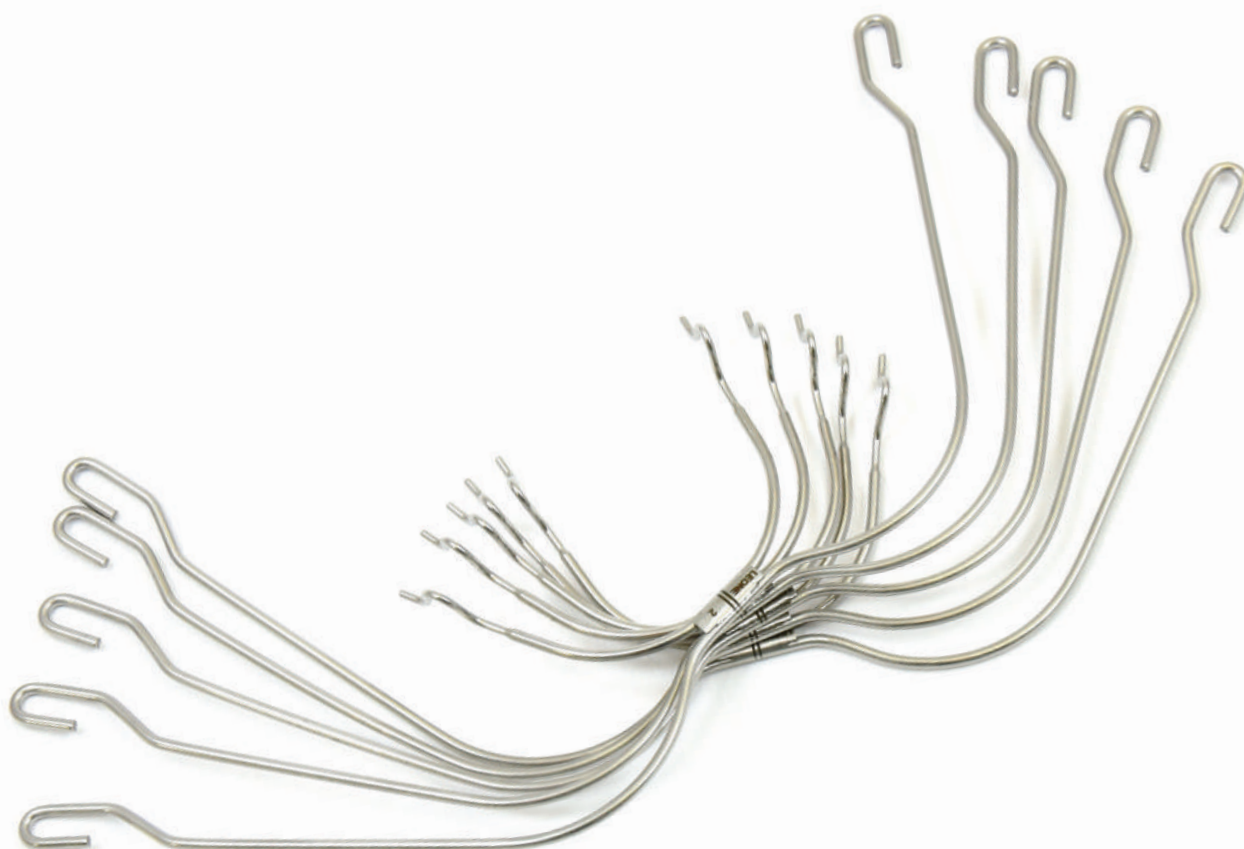

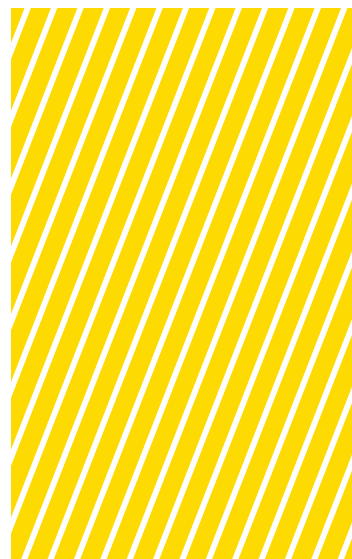

КОРРЕКТОР II КЛАССА

Аппарат для устранения несоответствия требованиям II класса. Небольшие размеры устройства обеспечивают оптимальный комфорт пациента, в то время как постоянное и незначительное усилие, создаваемое пружиной MEMORIA * 200 g, расположенной внутри поршня, стимулирует выдвижение нижней челюсти. В этой новой версии улучшены плавность перемещения и прочность телескопического механизма. В комплект поставки входят все необходимые детали для применения устройства двусторонней коррекции.

EXTRA-SHORT



SHORT




LONG




Выпускается в **3 вариантах** длины с мезиальным и дистальным креплением к трубке верхнего моляра, что обеспечивает в общей сложности 6 возможных положений во рту. При использовании в мезиальном положении его можно надеть на одну трубку прямого наклеивания без использования кольца с круглой трубкой.

МЕЗИАЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ К ВЕСТИБУЛЯРНОЙ ТРУБКЕ

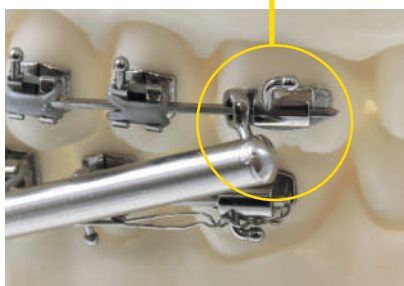

ДИСТАЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ К ВЕСТИБУЛЯРНОЙ ТРУБКЕ

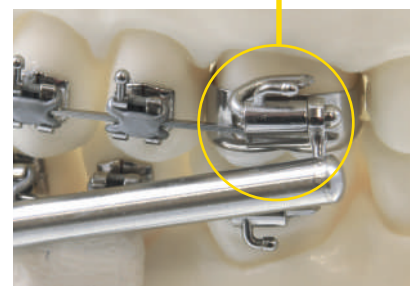

Чтобы избежать поломки, аппарат не следует устанавливать при полном сжатии: устанавливая во рту при обычном прикусе, должна быть видна часть поршня, выходящего из трубки не менее чем на **2 мм**.



*PATENTED

ДОСТУПЕН В 2 ВЕРСИЯХ:

1 С ПЕРЕДНЕЙ ПЕТЛЕЙ



2 С ПЕРЕДНЕЙ КРЮЧКОМ



С ПЕРЕДНЕЙ ПЕТЛЕЙ	С ПЕРЕДНЕЙ КРЮЧКОМ	Тип	Длина при полном расширении (пассивная конфигурация)	Длина при полном сжатии (включая дополнительную возможную компенсацию на 2 мм, см. стр. 165)	Максимальный предохранительный ход пружины	Максимально допустимое открытие для предотвращения разборки
M2302-00	M2301-00	EXTRA-SHORT	31 мм	25 мм	7,5 мм	48 мм*
M2302-01	M2301-01	SHORT	35 мм	28 мм	10 мм	56 мм*
M2302-02	M2301-02	LONG	40 мм	33 мм	10 мм	62 мм*



*Расстояние между 2 петлями или крючками крепления



M2301-91
КОМПЛЕКТ КОРРЕКТОРОВ КЛАССА
II С КРЮЧКОМ

Упаковка из 3 корректоров с передним крючком (1 очень короткий, 1 короткий, 1 длинный) и 6 измерительных линеек

M2302-91
КОМПЛЕКТ КОРРЕКТОРОВ КЛАССА
II С ПЕТЛЕЙ

Упаковка из 3 корректоров с передним ушком (1 очень короткий, 1 короткий, 1 длинный) и 6 измерительных линеек



С помощью этой измерительной линейки будет просто и интуитивно понятно определить, какой из трех корректоров подходит больше всего.



M3052-00

МИНИ ГУБНОЙ БАМПЕР ПРОФ. NICOLA VELTRI

Разработано профессором Николой Велтри: этот бампер предназначен для использования у пациентов с молочными или смешанными зубами с недостатком места и/или маленькой челюстью сагиттального или трансверзального характера. Ранняя установка на молочные зубы положительно стимулирует развитие нижней челюсти. Мини губной бампер выполнен с особым наклоном дугообразной проволоки, так что передний экран расположен в области, где губа сильно выдвинута вперед, и оснащен стопорным регулируемым винтом, который обеспечивает точное включение без необходимости сгибать проволоку. Для регулировки упора требуется отвертка REF P1520-00.

Упаковка 5 шт




ГУБНОЙ БАМПЕР

Изготовлены из биомедицинской нержавеющей стальной проволоки .045". Бампер имеет нетоксичное технополимерное покрытие. Упаковка 10 шт.

M3050-00 без петель


M3051-00 с петлями

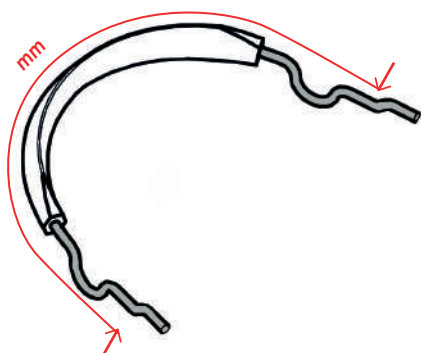

ГУБНОЙ БАМПЕР С КРЮЧКАМИ И БАЙОНЕТНЫМИ ИЗГИБАМИ



размер	мм	упак.	упак.
1	76	M3051-01	M3051-011
2	80	M3051-02	M3051-012
3	84	M3051-03	M3051-013
4	88	M3051-04	M3051-014
5	92	M3051-05	M3051-015

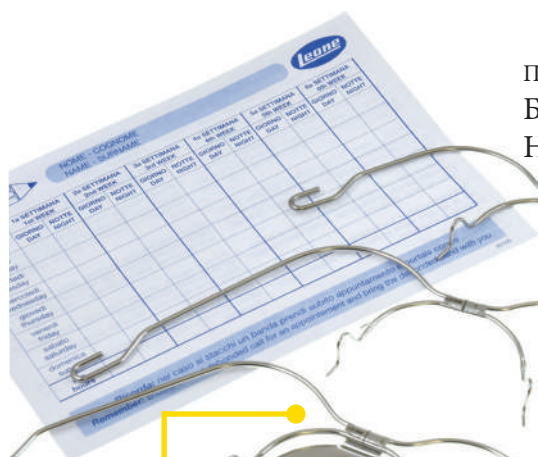


ПОЛНОСТЬЮ ИЗГОТОВЛЕННЫ ИЗ
БИМЕДИЦИНСКОЙ ПРУЖИННОЙ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ЛАЗЕРНО-СВАРНОЕ
СОЕДИНЕНИЕ
БЕЗ ПРИСУТСТВИЯ
ПАЯЛЬНОГО МАТЕРИАЛА
УСТОЙЧИВ К РАЗРЫВУ И
ПРЕДОТВРАЩАЕТ АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ
РЕАКЦИИ ИЗ-ЗА БИМЕТАЛЛИЗМА

РАЗМЕРЫ ВНЕШНЕЙ ДУГИ:
1,80 мм В ДИАМЕТРЕ
ДОСТУПНО В ТРЕХ ДЛИНАХ

ВНУТРЕННЯЯ ЦЕЛЬНАЯ ДУГА:
С КОНЦЕВОЙ ЧАСТЬЮ 0,045 ДЮЙМА (1,14
мм)

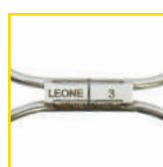

СЕРЕДИНА
И НОМЕР
ЧЕТКО ОБОЗНАЧЕНЫ
ЛАЗЕРОМ


БЛЕСТЯЩАЯ
ПОЛИРОВКА
ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ
ГИГИЕНЫ

ДОСТУПНЫЕ ВЕРСИИ:

- СТАНДАРТНАЯ
- С СФОРМИРОВАННЫМИ ПЕТЛЯМИ
- С ПЛАСТИНАМИ И ДВОЙНЫМИ ПЛАСТИНАМИ

ВСЕ ЭТО С ВОЗМОЖНОСТЬЮ УСТАНОВКИ
КРЮЧКОВ ДЛЯ РЕЗИНОВ

**ВНИМАНИЕ: ВСЕ ВНЕРОТОВЫЕ ЛИЦЕВЫЕ
ДУГИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С СИЛОВЫМИ МОДУЛЯМИ
M0810.**

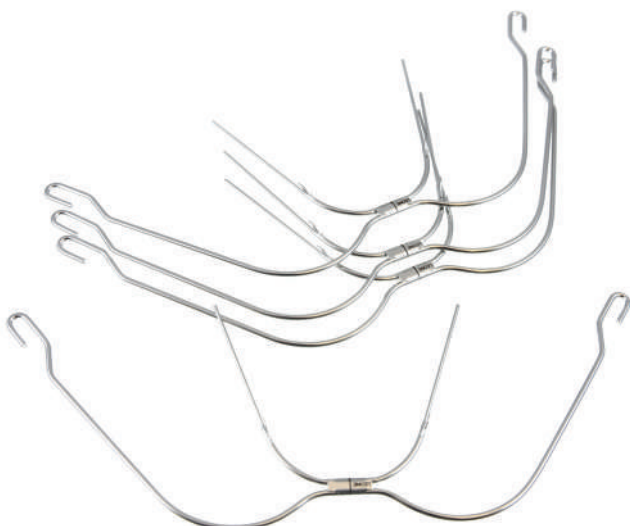


СТАНДАРТНЫЕ ВНЕРОТОВЫЕ ЛИЦЕВЫЕ ДУГИ

Благодаря выбору изготовления внутренней цельной дуги из нержавеющей стали с концевой частью 0,045 дюйма (1,14 мм), реализация петель и/или байонетных изгибов не снижает ее структурную прочность, обеспечивая передачу дополнительных внутриротовых сил к трубкам на кольцах. Доступны в трех вариантах длины и с крючками для эластиков

**ВНИМАНИЕ: ВСЕ ВНЕРОТОВЫЕ
ЛИЦЕВЫЕ ДУГИ
ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С
СИЛОВЫМИ МОДУЛЯМИ
M0810.**



	внешний диаметр дуги		внешний диаметр дуги	стандартная лицевая дуга		стандартная лицевая дуга с крючками для эластиков	
	мм	мм	дюйм	упак.	упак.	упак.	упак.
внешняя дуга EXTRALONG	1,80	1,14	.045	M4840-00 1	M4840-001 10		
внешняя дуга LONG	1,80	1,14	.045	M4800-00 1	M4800-001 10	M4801-00 1	M4801-001 10
внешняя дуга SHORT	1,80	1,14	.045	M4830-00 1	M4830-001 10	M4831-00 1	M4831-001 10

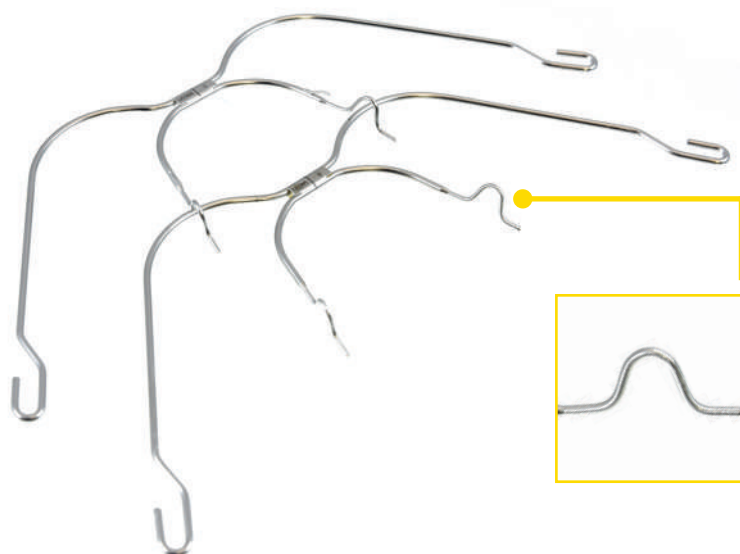

ВНЕРОТОВЫЕ ЛИЦЕВЫЕ ДУГИ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СФОРМИРОВАННЫМИ ПЕТЛЯМИ

Благодаря выбору изготовления внутренней цельной дуги из нержавеющей стали с концевой частью 0,045 дюйма (1,14 мм) предварительно сформированные петли легко адаптируются к потребностям пациента, а также очень устойчивы к поломке. Доступны в пяти размерах, как с крючками для эластиков для передних зубов, так и с пластиной для облегчения введения в нижнюю часть.


ВНИМАНИЕ: ВСЕ ВНЕРОТОВЫЕ ЛИЦЕВЫЕ ДУГИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С СИЛОВЫМИ МОДУЛЯМИ M0810.

С СФОРМИРОВАННЫМИ ПЕТЛЯМИ

d = ширина между молярами от петли до петли в миллиметрах		длинная внешняя дуга		короткая внешняя дуга	
размер		упак.	упак.	упак.	упак.
	83	1	M4805-01	M4805-011	M4835-01
	90	2	M4805-02	M4805-021	M4835-02
	97	3	M4805-03	M4805-031	M4835-03
	104	4	M4805-04	M4805-041	M4835-04
	111	5	M4805-05	M4805-051	M4835-05

СФОРМИРОВАННЫМИ ПЕТЛЯМИ И КРЮЧКАМИ ДЛЯ ЭЛАСТИКОВ


d = ширина между молярами от петли до петли в миллиметрах		длинная внешняя дуга	
размер		упак.	
	83	1	M4806-01
	90	2	M4806-02
	97	3	M4806-03
	104	4	M4806-04
	111	5	M4806-05

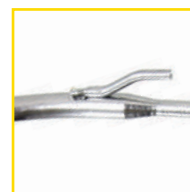

С ФОРМИРОВАННЫМИ ПЕТЛЯМИ И ПЛАСТИНАМИ

d = ширина между молярами от петли до петли в миллиметрах		с накусочной пластиной из твердой нержавеющей стали	
размер		упак.	
	83	1	M4808-01
	90	2	M4808-02
	97	3	M4808-03
	104	4	M4808-04
	111	5	M4808-05



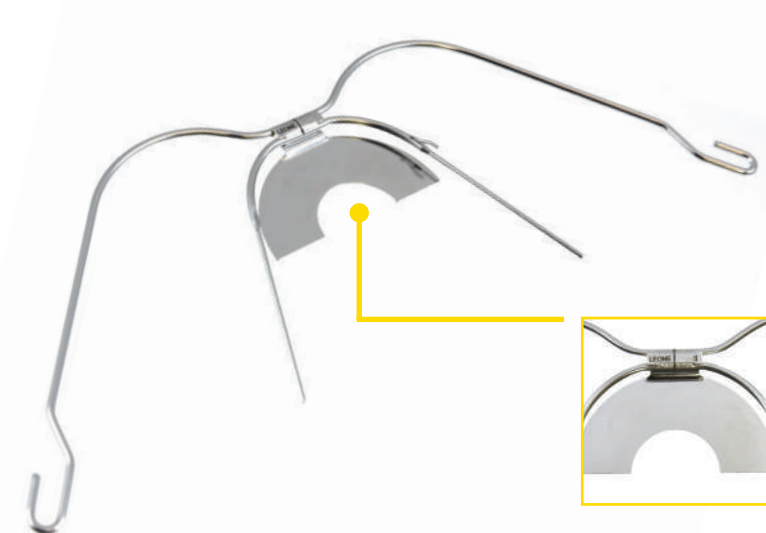

ВНЕРОТОВЫЕ ЛИЦЕВЫЕ ДУГИ С ОДИНАРНЫМИ И ДВОЙНЫМИ НАКУСОЧНЫМИ ПЛАСТИНАМИ

Пластина изготовлена из нержавеющей стали и приварена лазером к передней части лицевой дуги. Выпускаются с одинарными или двойными пластинами, с мягкими или жесткими пластинами, с крючками, а также с крючками и эластичным ретрактором.

ВНИМАНИЕ: ВСЕ ВНЕРОТОВЫЕ ЛИЦЕВЫЕ ДУГИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С СИЛОВЫМИ МОДУЛЯМИ M0810.

	стандартная		с крючками для эластиков		с крючками и эластичным ретрактором		
							
	с пластиной	с двойной пластиной	с пластиной		с пластиной		упак.
накусочная пластина из твердой нержавеющей стали	M4808-00	M4824-00	M4809-00		M4807-00		1
накусочная пластина из мягкой нержавеющей стали	M4808-10	M4824-10	M4809-10		M4807-10		



M3620-01 КОНВЕРТ ДЛЯ ВНЕРОТОВЫХ ЛИЦЕВЫХ ДУГ И ГОЛОВНЫХ ШАПОК

В упаковке 10шт



M3307-00 СТОПОР ДЛЯ ДУГ ДЛЯ ПРИВАРИВАНИЯ

Изготовлен из биомедицинской нержавеющей стали. В основном он используется с внутриротовыми дугами и губным бампером. Просто используйте точечный сварочный аппарат, чтобы установить стопор. Для использования с проволокой диаметром 1,14 мм (0,045 дюйма). В упаковке 10 шт



M3309-00 ВИНТОВОЙ СТОПОР ДЛЯ ЛИЦЕВОЙ ДУГИ

Изготовлен из нержавеющей стали. Для использования с проволокой диаметром 1,14 мм (0,045 дюйма). В упаковке 10 шт

M3309-95 КОМПЛЕКТ ВИНТОВЫХ СТОПОРОВ ДЛЯ ЛИЦЕВОЙ ДУГИ

Упаковка содержит:
50 винтовых стопоров и 1 отвертка



ЛИЦЕВЫЕ МАСКИ

Применяются для лечения верхнечелюстной недостаточности, прогнатизма нижней челюсти и расщелины неба. Обратное ортопедическое натяжение между верхней и нижней челюстями облегчает последующее ортодонтическое лечение. Изготовлены из проволоки из биомедицинской стали и нетоксичного акрила, маски могут быть адаптированы для выполнения любой индивидуальной регулировки размера, как по вертикали, так и по горизонтали. Все насадки фиксируются установочными винтами в металлических корпусах. Лицевые маски со скуловыми фиксаторами снабжены регулируемым ремешком.

В упаковке 1 маска для лица, 1 регулировочный ключ, инструкция по применению в конверте для пациента.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

M0777-00	Подушечка для подбородка	В упаковке 1 шт
M0778-00	Накладка на лоб	В упаковке 1 шт
M0779-00	Скуловая удерживающая накладка	В упаковке 2 шт



С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ

БЕЖЕВАЯ	КРАСНАЯ	ЖЕЛТАЯ	ЗЕЛЕНАЯ	
M0774-00	M0774-00R	M0774-00G	M0774-00V	SMALL
M0776-00	M0776-00R	M0776-00G	M0776-00V	LARGE
M0773-00				MINI



С УНИВЕРСАЛЬНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ

БЕЖЕВАЯ	КРАСНАЯ	ЖЕЛТАЯ	ЗЕЛЕНАЯ
M0775-00	M0775-00R	M0775-00G	M0775-00V



С ВЕРТИКАЛЬНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ

БЕЖЕВАЯ	
M0774-01	SMALL
M0776-01	LARGE



С ОПОРОЙ НА ЩЕКАХ

БЕЖЕВАЯ
M0771-00



ДИНАМИЧЕСКАЯ ЛИЦЕВАЯ МАСКА

С ВЕРТИКАЛЬНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ

СИНЯЯ	КРАСНАЯ
M0772-01	M0772-01R

В упаковке:

- 1 маска для лица,
- 1 регулировочный ключ,
- 2 подушечки для лба,
- 2 подушечки для подбородка и инструкция по применению.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЭЛАСТИКИ

		внутренний диаметр	
		3/8" - 9,5 мм	1/2" - 12,7 мм
strong	8 унций - 224 г	K0935-08	K0936-08



M0790-00

ПОДБОРОДОЧНАЯ ПРАЩА

Для коррекции аномалий III класса с прогнатизмом нижней челюсти. Головная шапка и эластические тяги полностью адаптируемы; подбородок из натуральной кожи идеально подходит для любого лица. Цвет: синий.
Упаковка 1 шт

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

M0791-00 Подбородочная подушечка
Упаковка 1 шт

M0791-01 Эластики
Упаковка 2 шт



ГОЛОВНАЯ ШАПКА ДЛЯ СИЛОВЫХ МОДУЛЕЙ

Сильная тяга. Используется только с силовыми модулями. Устанавливается на предохранительные крючки силовых модулей. Изготовлена из гипоаллергенного и моющегося материала с удобной набивкой. Доступна в 3 размерах и 2 цветах.
В упаковке 1 шт

синяя	
small	M0805-00
medium	M0805-10
large	M0805-20

розовая	
small	M0805-00S
medium	M0805-10S
large	M0805-20S



ШЕЙНАЯ ПОДУШКА ДЛЯ СИЛОВЫХ МОДУЛЕЙ

Слабая тяга. Так же, как и головной убор, для использования с модулями безопасности и материалами. Доступна в 2 цветах для обеспечения психологического соответствия пациента.
В упаковке 10 шт

M0800-00S
M0800-00

розовая
синяя



M3613-01

КОНВЕРТ ДЛЯ ЛИЦЕВОЙ МАСКИ

Для индивидуальной маски пациента. Прозрачный, моющийся, полностью прозрачный.
В упаковке 10 шт



СИЛОВЫЕ МОДУЛИ


Только для использования с головной шапкой или шейной подушкой. Предохранительные застежки отсоединяют пружинящий ремень, когда усилие натяжения превышает 2 кг с каждой стороны. Эта система позволяет избежать опасных травм отскоком плеча лицевой дуги в случае отсоединения от трубок головной шапки. Спиральные пружины встроены в модули для обеспечения постоянной силы тяги. Доступны с тремя ремнями крепления с цветовой кодировкой, показывающей уровень усилия. В упаковке 10 шт

	цвет	
light	белый	M0810-01
medium	желтый	M0810-02
heavy	синий	M0810-03

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ
ПРУЖИННАЯ
СИСТЕМА
УСИЛИЯ


ПРУЖИНЫ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПОСТОЯННЫХ
СИЛ

РЕМНИ С
ПРОНУМЕРОВАННЫМИ
НАСЕЧКАМИ
ДЛЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ

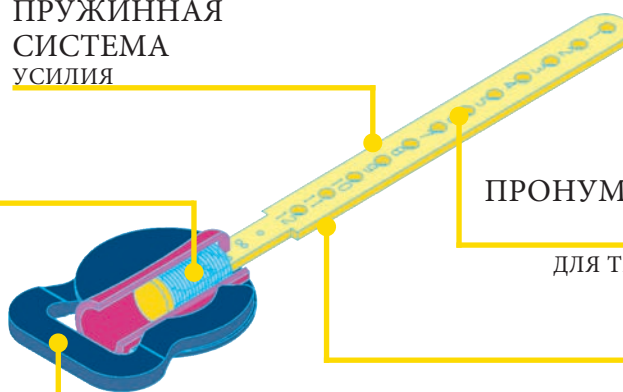

РЕМНИ РАЗНОГО
ЦВЕТА
ДЛЯ УКАЗАНИЯ
РАЗЛИЧНОЙ СИЛЫ
ПРУЖИНЫ МОДУЛЕЙ

ПОЛНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ДЛЯ ПАЦИЕНТА
ЗАСТЕЖКИ ОТСОЕДИНЯЮТ
ПРУЖИНАЩИЙ РЕМЕНЬ, КОГДА
СИЛА НАТЯЖЕНИЯ ПРЕВЫШАЕТ 2
КГ С КАЖДОЙ СТОРОНЫ

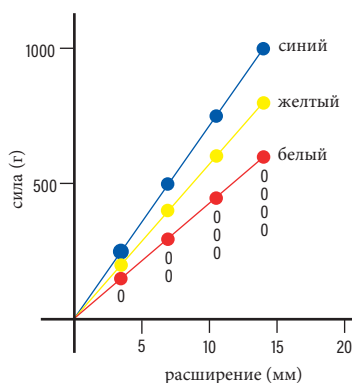

Усилием тяги, создаваемым каждым модулем, можно легко управлять: когда на пластиковой ленте при тяге появляется натяжение в 2 надреза, высвобождается 2/4 (две четверти) от общего усилия пружины. На приведенной выше диаграмме показаны усилия, создаваемые каждым типом модуля.